

**MOTEUR DE
RETOUCHE**

STRONG 209B
STRONG 107



MODE D'EMPLOI

STRONG 209 B

MOTEUR DE RETOUCHE

2

Pour la France

FC Medical Device

Tel : +33 1 34 93 77 46

Fax : +33 1 39 12 36 22

Courriel : fcmedicaldevice@aol.com

Site Web : www.fcmedicaldevice.com



Représentant EU

Dongbang Acuprime

Gater House, Gater Lane, Palace gate

Exeter.EX 1JL. United Kingdom

Tel 44 1392 273908 Fax 44 1392 273909



3

Sommaire

Page

Déballage et contrôle du matériel	4
Dimensions & Caractéristiques	5
Recommandations	6
Remplacement des balais charbons	7
Remplacement des différentes griffes	8-9
Commandes et fonctions	10-11
Caractéristiques techniques	12
Informations Générales	13
Garantie	13
Note	14


Déballage

4

Vérifier le contenu de la boîte.
Elle doit contenir :

- 1 Boîtier
- 1 Pièce à main
- 1 Pédale de contrôle
- 1 Un support de pièce à main
- 1 Jeu de balais (charbons)
- 1 Clé pour changer les griffes
- 1 Fusible de rechange
- 1 Manuel d'utilisation
- 1 Bon de garantie

Dimensions & Caractéristiques

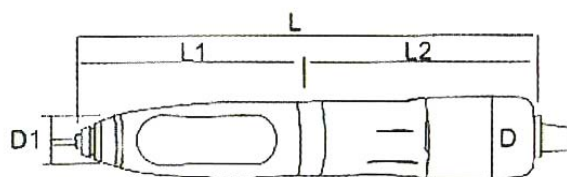

Pièce à main STRONG 107							
Vitesse en t/mn	Poids	Couple	Dimensions en mm				
			L	L1	L2	D	D1
35.000	232g	300gf.cm	159	74	85	28.2	18.9

Vitesses de rotation recommandées

6

Tableau des vitesses recommandées par rapport au Ø de l'instrument utilisé

Utiliser des instruments ISO


Ø du fût 2.35 (ISO 7785-2

(Type 2)

Accepte les fûts court (10mm)




Le non respect des vitesses recommandées ou l'utilisation d'instrument voilé peut être cause d'accident. Ne pas tenter d'ouvrir la pièce à main avant son arrêt complet et sans avoir coupé l'alimentation électrique.

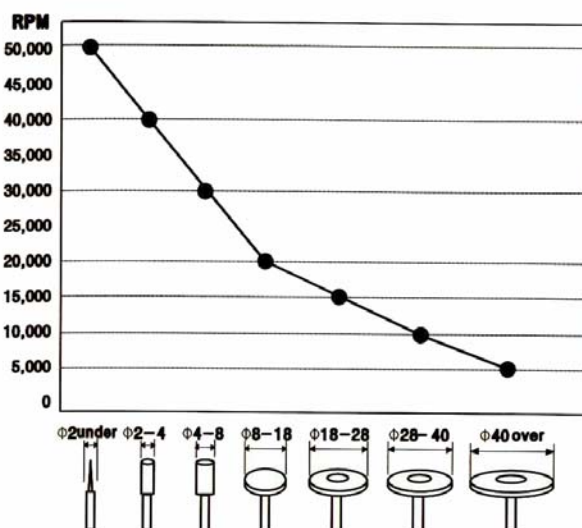

7

Remplacement des charbons balais

- 1- Dévisser à la main la partie arrière de la pièce à main
- 2- A l'aide d'un tournevis dévisser les 2 supports de charbon
- 3- Remplacer les 2 charbons par les neufs fournis avec votre moteur lors de l'achat

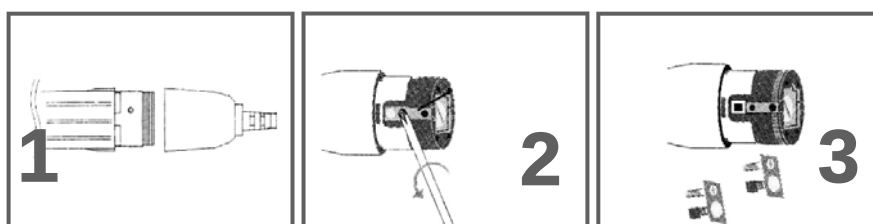


Remplacement du fusible

Remplacer le fusible situé à l'arrière du boîtier (voir schéma page 9) fourni avec votre moteur lors de l'achat


Caractéristiques du fusible (240V-T2A/250V)

Changement de griffe sur différentes pièces à main

8

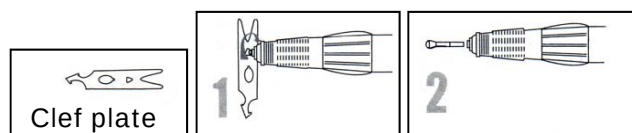


- 1- Ouvrir la griffe et ôter l'instrument
- 2- Mettre la clef (fournie), et tourner dans le sens contraire des aiguilles d'une montre

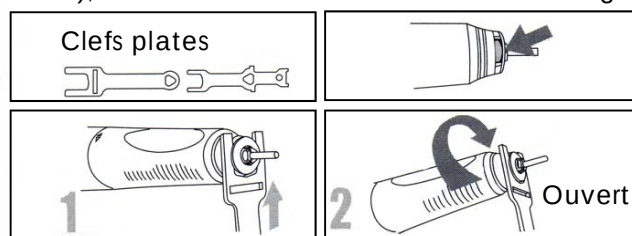

- 1- Mettre et faire glisser la clef pour la bloquer (fig1) et faire tourner la griffe
- 2- Dévisser le nez tourner dans le sens de l'ouverture des griffes, contrôler
- 3- Dévisser le mandrin dans le sens contraire des aiguilles d'une montre
- 4- Changer le mandrin
- 5- Fixer la griffe et visser le mandrin dans le sens des aiguilles d'une montre

9

Changement de griffe sur différentes pièces à main

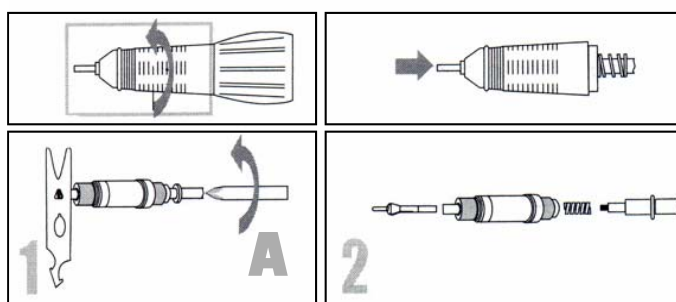


- 1- Mettre un instrument et verrouiller la pièce à main
- 2- Dévisser le nez de la pièce à main
- 3- Sortir la partie interne
- 4- Mettre la clef en place (fig1), puis à l'aide d'un tournevis cruciforme dévisser la griffe (fig A)
- 5- Procéder au remplacement puis remonter l'ensemble, Contrôler

Commandes & Fonctions

10

- A- Cordon électrique
- B- Connecteur cordon pièce à main
- C- Interrupteur de mise en fonctionnement continue
- D- Griffe (Ouvverte/Fermée)
- E- Inversion du sens de rotation
- F- Connecteur pédale de contrôle
- G- Pédale de contrôle
- H- Support pièce à main

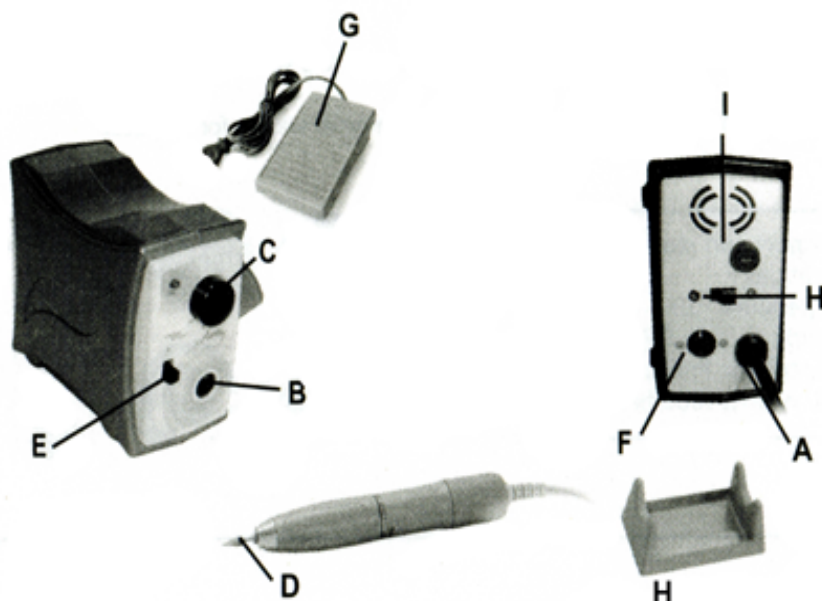

Caractéristiques techniques

Courant électrique : 220/240V AC / 50/60 Hz

Environnement

Conditions de stockage et d'expédition :

- Température: 10°C ~ +40°C
- Humidité : 30% ~ 75 %
- Pression de l'air : 700 hPa ~ 1060 hPa

Informations générales / Garantie

3. Information fabricant

SAESHIN
Head Office & Factory
95-15 Paho-Dong, Dalseo-Gu, Daegu
KOREA

4. Garantie

Le fabricant garantit l'appareil tant que les règles de stockage, d'entretien et les conditions d'utilisation et d'entretien sont respectées.

La garantie est de 12 mois et prend effet à la date d'installation du matériel.

Si, durant la période de garantie, le matériel est endommagé par la faute du propriétaire, les frais de réparation seront à sa charge.

Un appareil ayant subi des dommages mécaniques ou utilisé pour d'autres opérations que celles citées dans le présent manuel n'est pas soumis aux garanties de réparation.